

Tijdschakelaar

Het aan/uitschakelen van de lampen gaat met de tijdschakelaar; door rechtsom te draaien kan het gewenste aantal minuten (max. 30 minuten) ingesteld worden. De tijdschakelaar zal na afloop van de ingestelde tijd de lampen automatisch uitschakelen. Wanneer u het gebruik wilt onderbreken of wilt afbreken, laat de timer dan doorlopen totdat deze zelf stopt. Het is beter om de tijdschakelaar niet terug te draaien aangezien hij dan beschadigd kan raken.

Onderhoud, schoonmaken en technische gegevens

Haal eerst de stekker uit het stopcontact. Neem de buitenzijde van de Collagen Light Box met een licht vochtige doek af. Gebruik geen schurende of krassende middelen. Zorg dat er geen water in het apparaat loopt. De lampen kunnen met een droge doek of zachte borstel afgestoft worden. De reflectorplaat mag alleen met een zeer zachte borstel afgestoft worden (indien nodig). Vervanging van het aansluitsnoer (bij beschadiging) alleen laten uitvoeren door een bevoegd monteur om levensgevaarlijke situaties te voorkomen. De lampen hebben een lange levensduur van ca. 400/500 uur. Voor vervanging zie het laatste hoofdstuk “vervanging van lampen”. Dit apparaat is gebouwd volgens de Europese veiligheidsnormen en draagt daarom het CE-teken. Isolatieklasse II, Netspanning 230 volt, 50 Hz, vermogen 200 Watt.

Veiligheidsinstructies

- VOORDAT U DE PANELEN SLUIT, MOETEN DE LAMPEN UIT ZIJN! Wanneer u dit per ongeluk vergeet, zal het veiligheidssysteem de lampen automatisch uitschakelen. Maak hier echter geen gewoonte van want dit kan het apparaat beschadigen. Nadat het apparaat is uitgezet dienen de lampen eerst een paar minuten af te koelen alvorens u de panelen sluit.
- Gebruik het apparaat nooit in een badkamer, sauna of andere vochtige ruimte.
- Indien één of meer van de volgende aandoeningen op u van toepassing is, raden wij u aan voor gebruik de huisarts te raadplegen: epilepsie, gebruik van drugs of medicijnen, overgevoeligheid voor licht, duizelig worden, snel flauwvallen, hoge bloeddruk en huidziekten.
- Gebruik het apparaat niet als de tijdschakelaar beschadigd is of niet goed functioneert en ook niet als het snoer of andere onderdelen beschadigd zijn. Raadpleeg in dit geval de servicedienst. (Zie garantiebewijs of aankoopbon)
- Vervang de lampen alleen door het aanbevolen type. Hoe u de lampen kunt vervangen kunt u verderop in deze handleiding lezen bij het hoofdstuk ‘vervangen van de lampen’. De reflectorplaat mag nooit door een ander type vervangen worden.
- Laat de Collagen Light Box nooit gebruiken door kinderen of door personen die door een handicap het apparaat niet zelf kunnen bedienen en/of de aanbevelingen in deze gebruiksaanwijzing niet kunnen opvolgen.

Vervangen van lampen

Omdat de Collagen Light Box is voorzien van elektronische voorschakelapparaten wat flikkering van de lampen bij het aanzetten voorkomt, bedraagt de levensduur van de lampen ongeveer 400/500 uur. Bij dagelijks gebruik is dat voldoende voor 3 jaar. Een duidelijke afname van het resultaat is het beste signaal dat de lampen vervangen dienen te worden.


Het vervangen van de lampen is eenvoudig en hoe u dat moet doen staat hier onder in 5 punten beschreven. 12 nieuwe lampen kosten u Euro 149,- inclusief BTW dat is ongeveer Euro 50,- per jaar. Afgezien van de aankoopprijs zijn de kosten om uw huid elastisch en stevig te houden minimaal vergeleken bij de bestaande methoden om dit te bereiken. De Collagen Light Box is derhalve een goede investering en op een zeker een “beste koop”. Gebruik uitsluitend de speciaal voor dit apparaat ontworpen lampen : Eurosolar Collagen Technology ECT15W. Gebruik van andere lampen kan de werking teniet doen.

Verwijderen en plaatsen van lampen:

1. Wees er zeker van dat het apparaat uitgeschakeld is en haal de stekker uit het stopcontact
2. Verwijder de beschermkapjes die boven en onder voor de lampen zitten (twee links, twee rechts en twee in het midden) U verwijderd deze door ze de richting op te duwen die staan aangegeven op het plastic.
3. Verwijder de lampen door deze heel voorzichtig en zorgvuldig los te draaien.
4. Zet de nieuwe lampen in de gezichtsbruiner. Draai deze vast door ze voorzichtig op hun plaats te draaien. (in tegenovergestelde richting)
5. Plaats de beschermkapjes terug.

Onderdelen en functies

- A Knop waarmee u de panelen opent
- B De panelen
- C Tijdschakelaar
- D Standaard
- E Knop waarmee u de positie van de Collagen Light Box kunt bepalen.
- F Veiligheidsschakelaars (deze zorgen ervoor dat de lampen automatisch uit gaan wanneer u per ongeluk de panelen sluit tijdens een kuur. dit mag echter geen gewoonte worden! (zie veiligheidsinstructies)
- G Springveren waarmee het openen van de panelen wordt vergemakkelijkt.
- H Lampen

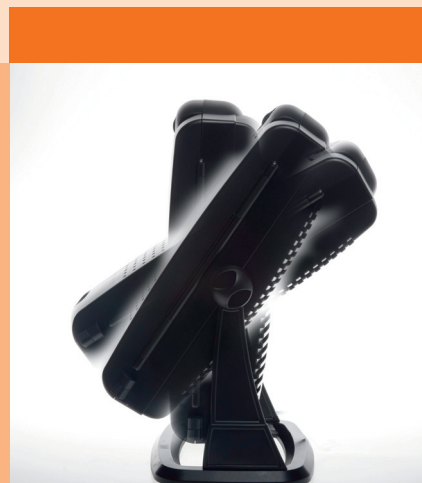

Let op:

Tijdens transport kunnen de lampen iets verdraaid zijn waardoor ze even geen contact maken. Door iets aan deze lampen te draaien wordt dit probleem verholpen. Let op: de lampen branden altijd in combinatie met een andere. Er branden dus altijd 2 lampen niet of een meervoud daarvan. Helpt draaien aan de ene niet probeer dan de andere.

Conformiteitsverklaring

De Collagen Light Box voldoet aan alle huidige Europese normen met betrekking tot veiligheid en milieu. Eurosolar BV bevestigt dat dit product voldoet aan de laagspanningsrichtlijn 2006/96/EC en aan de EMC richtlijn 2004/108/EC (elektromagnetische compatibiliteit) alsmede aan de RoHS richtlijn 2002/95/EC (gebruik gevaarlijke stoffen). De Collageen Light Box voldoet derhalve aan de onderstaande Europese normen:

EN60335-1: 2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A2:2006
EN60335-2-27: 2003
EN55015:2000+A1:2001+A2:2002
EN61547:1995+A1:2001
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
IEC62321/Ed.1

Onderliggende rapporten:

STE-LVD-S071481DOC, STE-EMC0704039DOC, STE-ESD-S071362AOV

Dit product draagt met recht het CE teken. De Collagen Licht Box is geen medisch apparaat.

Collagen Light Box



Eurosolar b.v.
Fit & Beautiful

Gebruiksaanwijzing rev.082009

Inleiding

De Collagen Light Box is een geheel nieuwe methode om veroudering van de huid tegen te gaan en deze te revitaliseren en er weer steviger, jeugdiger en frisser uit te laten zien. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brochure neemt u dan gerust contact met ons op. U vindt alle informatie ook op onze speciale website www.collageenlight.nl

Algemene informatie

De Collagen Light Box is een product dat de gebruiker in staat stelt haar of zijn huid mooier en jonger te laten lijken zonder het gebruik van dure collageenhoudende gels en crèmes of dure behandelingen.

Het speciale rode licht van de lampen stimuleert de aanmaak van collageen in de huid (lederhuid). Collageen is de belangrijkste factor voor het elastisch en sterk houden van de huid. Dit stimulerende effect op de collageenproductie is wetenschappelijk bewezen (*) en tevens in 2008 onder een groep gebruikers getest met zeer positieve resultaten (**). Een tekort aan collageen in de huid geeft ook een verhoogd risico op verzwakking van spieren en botten.

Het gebruik van de Collagen Light Box heeft dus veel voordelen. Tot je 25e produceert de huid voldoende collageen om de huid elastisch en stevig te houden. Na je 25e neemt de productie van collageen geleidelijk af waardoor de huid veroudert. De huid wordt slapper, gaat hangen en er ontstaan rimpels. Met dit product waarmee de collageen productie wordt gestimuleerd bent u in staat het verouderingsproces van de huid te vertragen en deze steviger en elastischer te laten worden waardoor rimpels worden verminderd en uw huid er jonger, frisser, steviger en dus mooier uit gaat zien. Het rode collageenlicht bevat geen schadelijk UV of infrarood licht. Er zijn ook geen negatieve bijeffecten bekend. U hoeft geen beschermbril op gedurende het gebruik.

(*) Bron: Red light therapy for rejuvenation and Anti Wrinkle by Dr Ernst Smolka July 2009. Based on: The Photobiology of LED Phototherapy by Dr R.Glen Calderhead, MSc, Dr Med Sci FRSM President of SG Biomedical, Japan and Research coordinator at the Japan Phototherapy Laboratory in Tokyo. (**) Bron: Mon-Amie : onderzoek onder 51 eindgebruikers collageenlicht therapie in 2008 in Clinique Piano Zwitserland

Contact

Eurosolar BV
Peppelkade 60
NL-3992 AK HOUTEN
THE NETHERLANDS
www.collageenlight.nl

Gebruik van de Collagen Light Box

Heel eenvoudig. U opent het apparaat middels de ontsluitingsknop onderaan in het midden en u zet de timer op de gewenste tijd. Vervolgens gaat u ervoor zitten. Dit product is speciaal ontworpen om alle delen van uw gezicht en de bovenkant van het decolleté te bereiken. Het apparaat heeft een basis van 6 lampen voor de voorkant van het gezicht en het decolleté en twee zijpanelen met ieder 3 lampen voor de zijkanten van het gezicht en de hals. Een optie om het effect te versterken is om de beide zijkanten met de handen dichterbij het gezicht te brengen. (zie afbeelding hieronder)



Verwijder alle make- up en maak uw gezicht schoon. Sluit het apparaat aan op het lichtnet (230V 50Hz) en open de panelen door de knop onder in het midden in te drukken. Zet het apparaat middels de stelknop in de juiste stand en stel de timer in op de gewenste tijd. Zie hiervoor het hoofdstuk “inschakelen” verderop in deze gebruiksaanwijzing. De lampen zullen onmiddellijk aanspringen dankzij het gebruik van elektronische voorschakelaars. Nadat de behandelingstijd verstreken is schakelt het apparaat automatisch uit. Sluit u per ongeluk de panelen dan gaat het apparaat om veiligheidsredenen ook uit. Vergeet niet uw ogen te sluiten tijdens het gebruik !!!

Om een duidelijke verbetering van de huid en een afname van de rimpels te kunnen constateren dient het product langere tijd gebruikt te worden. Het is geen magisch apparaat maar een serieus product om de huid te verbeteren en dat kost tijd. Hoe lang u het apparaat uiteindelijk moet gebruiken is afhankelijk van uw huidtype uw leeftijd en uw levensstijl. In zijn algemeenheid is het voor iedereen anders maar u zult na verloop van tijd zeker resultaat zien. We kunnen op basis van het onderzoek in Zwitserland wel een aantal richtlijnen geven.

- Al na 10 behandelingen (ongeveer 2 tot 3 weken) stelde bijna 70% van de gebruikers een duidelijke verbetering van de fijne rimpeltjes in gezicht en decolleté vast. Na 20 behandelingen (ongeveer 5 weken) was dat al bijna 90% en na 30 behandelingen 100%.
- Na de gehele kuur (ongeveer 30 behandelingen) stelde 88% van de gebruikers een duidelijke verbetering van de diepe rimpeltjes in gezicht en decolleté vast.
- 97% van de gebruikers was na afloop tevreden over de resultaten.

Wij adviseren om het product de eerste 2 weken 4 keer per week 15 minuten te gebruiken op een afstand van ongeveer 15 cm. Daarna 5 weken 4 keer per week 20 minuten. De behandeling moet dan voltooid zijn en daarna voldoet in de regel een enkele sessie van 20 minuten per week. Hoe vaak en hoe lang u het product uiteindelijk moet gebruiken verschilt per individu en is afhankelijk van eerder genoemde factoren en dit zal duidelijk worden wanneer u het product gaat gebruiken.

U kunt afwijken van het schema maar overdrijven is nooit goed. Dus geen 2 behandelingen per dag. De lampen produceren vrij veel warmte. Het is daarom niet vreemd wanneer uw huid na verloop van tijd een beetje gaat “trekken”. U kunt achteraf maar eventueel ook vooraf een normale verzorgende vochtinbrengende gezichtscrème gebruiken.

SCHEMA (richtlijn):

Week	Aantal behandelingen	Tijd in minuten
1	4	15
2	4	15
3	4	20
4	4	20
5	4	20
6	4	20
7	4	20
8	2	20

Hierna eens per week 1 behandeling van 20 minuten.

Plaats de Collagen Light Box nooit in een badkamer, sauna of andere vochtige ruimte. Wees er zeker van dat uw stopcontact geschikt is voor dit apparaat.

Inschakelen

Start de Collagen Light Box door de twee zijpanelen te openen. Dit doet u door op knop A (zie onderstaande afbeelding) te drukken. De panelen zullen automatisch opengaan. U kunt de panelen nu handmatig verder openklappen totdat ze niet meer verder kunnen. (afbeelding B) forceer het openen van de panelen niet, dit kan het apparaat beschadigen. De panelen moeten in een bepaalde hoek staan om het resultaat zo optimaal mogelijk te maken. Draai het apparaat in de juiste positie naar uw gezicht. U kunt een positie kiezen door de knop aan de rechterkant van het apparaat te verstellen (naar links draaien: tekening E). De Collagen Light Box schakelt in door de stekker in het stopcontact te steken en de timer (C) in te stellen door de knop rechtsom te draaien.

