



NL Borstkolf
Gebruiksaanwijzing



0483



Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Inhoudsopgave

1. Verklaring van de symbolen	3
2. Kennismaking	3
3. Voorgeschreven gebruik.....	4
4. Aanwijzingen	4
5. Beschrijving van het apparaat	6
6. Ingebruikname.....	7
6.1 Borstkolf in elkaar zetten	8
6.2 Borstkolf reinigen en steriliseren.....	9
7. Bediening	9
7.1 Tips voor een betere melkstroom	9
7.2 Borstkolf bedienen	10
7.3 Borstkolf bedienen	11
7.4 Bediening van de handkolf	12
7.5 Moedermelk bewaren.....	13
7.6 Moedermelk geven	13
8. Wat te doen bij problemen?	14
8.1 Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen.....	14
9. Verwijdering	15
10. Technische gegevens	15
11. Netvoeding	16

Omvang van de levering

- Borstkolf (motorunit)
- Siliconenslangen met verbindingstuk om aan beide kanten af te kolven
- Siliconenslang om aan een kant af te kolven
- 2 kolfopzetstukken met siliconenmembraan en siliconenventiel
- 2 siliconenkussens (normaal formaat)
- 2 flesjes
- 2 schroefsluitingen voor flesjes
- Siliconenspeen
- Kap voor flesje
- Handkolf
- 2 flesjeshouders
- 2 adapters (voor Avent- en NUK-flesjes)
- Opbergtas
- Stekker
- 4 AA-batterijen
- Deze gebruiksaanwijzing

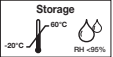
Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, massage, beauty, lucht en baby. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Verklaring van de symbolen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt:

	WAARSCHUWING Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico's of gevaar voor uw gezondheid
	LET OP Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of de toebehoren
	Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie
	Neem de gebruiksaanwijzing in acht
	Toegepast deel type BF
	Gelijkstroom
	Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
	Fabrikant
	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij gebruik
	Toegestane temperatuur en luchtvochtigheid bij opslag
IP 21	Beschermd tegen voorwerpen $\geq 12,5$ mm en tegen verticaal neervallende druppels.
	Geeft aan dat de verpakking overeenkomstig de verordening 1935/2004 producten bevat die bestemd zijn om met levensmiddelen in aanraking te komen.
	Serienummer
	Met de CE-markering wordt aangetoond dat het apparaat voldoet aan de fundamentele eisen van de richtlijn 93/42/EEG voor medische hulpmiddelen.
	Catalogusnummer van de fabrikant
	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet aan veiligheidsklasse 2.

2. Kennismaking

Met de borstkolfset BY 70 van Beurer kunnen vrouwen die de borst geven hun moedermelk eenvoudig en comfortabel thuis afkolven. Als de borst van een vrouw die borstvoeding geeft niet voldoende wordt gelegegd, kan hierdoor een pijnlijke melkophoping ontstaan, die in het ergste geval tot een ontsteking

van de tepel (mastitis) kan leiden. Met de borstkolf kan een melkophoping worden voorkomen door de moedermelk gericht af te kolven.

Bovendien zorgen borstkolven ook bij geïrriteerde of kapotte tepels voor verzachting. Met behulp van de ingebouwde stimulatiefunctie kunt u ook platte of ingetrokken tepels naar buiten halen om het afkolven van de moedermelk eenvoudiger te maken. De borstkolf maakt het ook mogelijk om de moedermelk in het flesje te bewaren, bijvoorbeeld voor als u ergens naartoe gaat of langere tijd niet bij uw baby bent.

Met de borstkolf kunt u ook moedermelk geven aan baby's die om gezondheidsredenen (te vroeg geboren, schisis) niet direct aan de borst van de moeder kunnen zuigen.

3. Voorgeschreven gebruik

Gebruik de borstkolf uitsluitend op de borst van vrouwen die borstvoeding geven voor het afkolven van moedermelk. Gebruik de borstkolf niet op dieren! De borstkolf is alleen bedoeld voor gebruik in huis/privégebruik en niet voor commerciële doeleinden.

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of verkeerd gebruik.

4. Aanwijzingen



WAARSCHUWING

Veiligheidsrichtlijnen

- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken.
- Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat er zich geen kabels en slangen binnen het bereik van het kind bevinden.
- Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Trek niet aan het netsnoer en verdraai of knik het ook niet.
- Controleer voordat u de borstkolf gebruikt of de technische gegevens op de voedingsadapter overeenkomen met de technische gegevens op de motorunit.
- Trek de stekker uit het stopcontact bij storingen, voor het reinigen en wanneer het apparaat niet in gebruik is.
- De borstkolf mag niet in aanraking komen met hete oppervlakken of scherpe voorwerpen.
- Gebruik geen toebehoren of aanvullende producten die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of zijn aangeboden als accessoire.
- Om hygiënische redenen mag de borstkolf slechts door één persoon worden gebruikt. Laat de borstkolf niet ook door andere vrouwen gebruiken die borstvoeding geven.
- De borstkolf mag uitsluitend worden gebruikt op de borst van een vrouw.
- Gebruik de borstkolf nooit als u zich slaperig voelt of als u slaapt.
- Gebruik bij de dubbele afkolmodus "2" alleen de bijbehorende slangverbinding met verbindingstuk voor 2 flesjes.
- Gebruik de borstkolf nooit in bad of onder de douche.
- Open de borstkolf in geen geval en schud er ook niet mee als er sprake is van een fout of een storing. Lees het hoofdstuk "Wat te doen bij problemen?". Neem contact op met de klantenservice of met de verkoper als uw probleem hier niet wordt beschreven.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde dealers worden uitgevoerd. Als u de borstkolf opent of zelf repareert, kan een probleemloze werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer u dit toch doet, vervalt de garantie.
- Dompel de borstkolf nooit onder in water.
- Raak de borstkolf nooit aan met natte of vochtige handen.
- Probeer de borstkolf niet te pakken als deze in het water is gevallen. Trek de voedingsadapter van de borstkolf onmiddellijk uit het stopcontact als de borstkolf in het water is gevallen.

- Leg de borstkolf op een stevige, vlakke ondergrond als u de borstkolf gebruikt.
- Rol het netsnoer volledig af om oververhitting te voorkomen.
- Plaats de borstkolf en de voedingsadapter nooit in de magnetron.
- Trek de voedingsadapter uit het stopcontact als u de borstkolf niet gebruikt. Laat de voedingsadapter van de borstkolf niet in het stopcontact zitten.
- Als het netsnoer van de borstkolf beschadigd raakt, moet het worden verwijderd.
- Verwarm moedermelk nooit in de magnetron. De moedermelk kan daardoor namelijk ongelijkmatig verwarmd worden, waardoor het kind zich bij het drinken aan de melk zou kunnen verbranden.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis.
- De borstkolf hoeft niet gekalibreerd te worden.
- Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de borstkolf en de toebehoren.



LET OP

- Bevochtig de borstkolf nooit met water. Het apparaat is niet beschermd tegen spatwater of vloeistoffen.
- Houd de borstkolf uit de buurt van sterke elektromagnetische velden, omdat er anders elektromagnetische storingen kunnen optreden die de werking van de borstkolf negatief kunnen beïnvloeden.
- Bescherm de borstkolf en de toebehoren tegen schokken, vocht, vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Trek niet aan de slangen van de borstkolf.
- Trek de voedingsadapter niet aan het netsnoer uit het stopcontact.



LET OP

Aanwijzingen met betrekking tot het transport van het flesje

- Als u moedermelk in het flesje vervoert (bijvoorbeeld onderweg of tijdens reizen), moet u erop letten dat de schroefsluiting van het flesje altijd stevig op het flesje is gedraaid.



WAARSCHUWING

Voor de veiligheid van uw kind!

- Dit apparaat mag alleen onder toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Voortdurend en langere tijd opzuigen van vloeistoffen via de speen veroorzaakt cariës.
- Gebruik de spenen voor het voeden en niet als fopspeen.
- Controleer voorafgaand aan het voeden altijd de temperatuur van de melk.
- Controleer het apparaat voor elk gebruik en trek de speen in alle richtingen.
- Gooi de speen weg bij de eerste tekenen van beschadiging of slijtage.
- Stel de speen niet bloot aan direct zonlicht of hitte en leg hem niet langer dan aanbevolen in een desinfecterend middel (de “sterilisatieoplossing”), omdat de speen daardoor beschadigd kan raken.
- Houd de speen uit de buurt van zoete substanties, omdat deze het ontstaan van cariës kunnen bevorderen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of antibacteriële schoonmaakmiddelen.
- Steriliseer alle onderdelen die met moedermelk in aanraking komen vijf minuten in kokend water.
- Reinig het apparaat voor elk gebruik.
- Zorg ervoor dat de vloeistof in het flesje nooit heter is dan 50 °C.



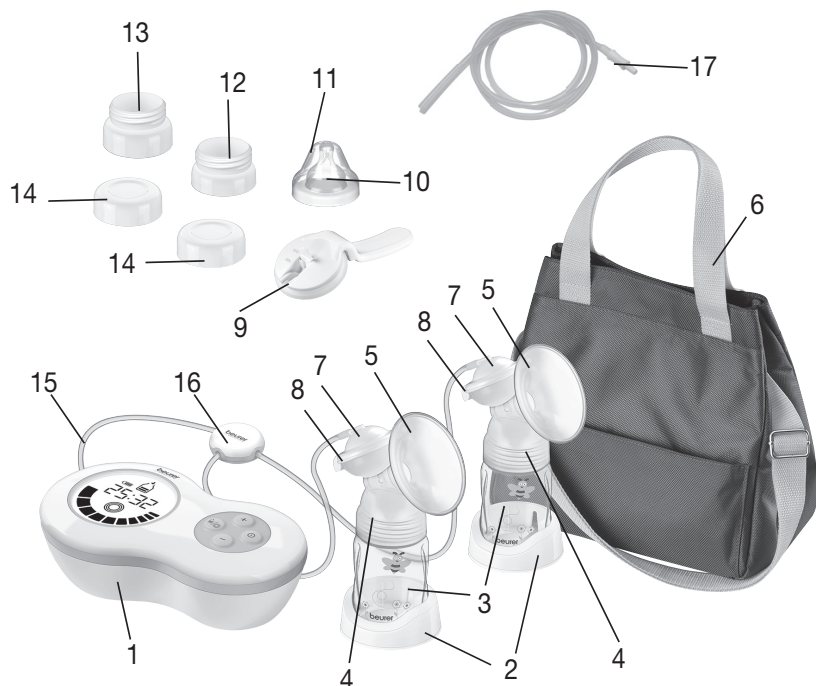
WAARSCHUWING

Tips voor het omgaan met batterijen

- Als vloeistof uit een batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- ⚠ Gevaar voor inslikken! Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.

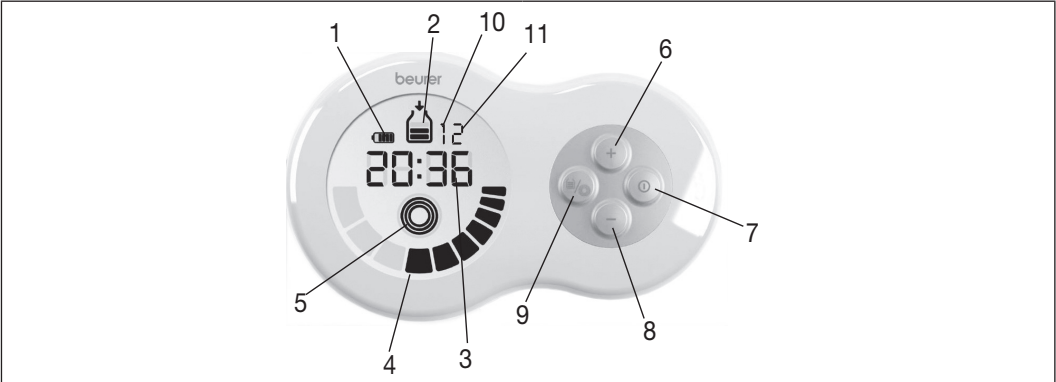
- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
- ⚠ Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opgeladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.

5. Beschrijving van het apparaat



1. Borstkolf met display	10. Speen
2. Flesjeshouder	11. Kap voor flesje
3. Flesje (180 ml)	12. Adapter voor NUK-flesjes (de borstkolf kan indien gewenst ook met deze flesjes worden gebruikt)
4. Siliconenventiel	13. Adapter voor AVENT-flesjes (de borstkolf kan indien gewenst ook met deze flesjes worden gebruikt)
5. Siliconenkussen (normaal formaat)	14. Schroefsluiting voor flesje
6. Draagtas	15. Siliconenslang voor dubbele afkolfmodus
7. Kolfopzetstuk inclusief kap met siliconenmembraan en siliconenventiel	16. Verbindingsstuk voor siliconenslang met dubbele afkolfmodus
8. Siliconenmembraan	17. Slang voor afkolven aan een kant
9. Greep voor handkolf met 2 standen	

Beschrijving van het display en de toetsen



1. Batterijstatus (bij gebruik zonder netvoeding)	7. AAN/UIT-toets
2. Afkolfmodus (moedermelk wordt afgekolfd)	8. “-”-toets (stimulatie- of afkolfstand verlagen)
3. Tijdaanduiding (aftellen voor stimulatie/gebruiksduur afkolfmodus)	9. MODUS-toets (wisselen tussen afkolf- en stimulatiemodus)
4. Stimulatie- of afkolfstanden	10. Instelling voor afkolven aan een kant (“+” en “-” tegelijkertijd indrukken)
5. Stimulatiemodus (de tepel wordt gestimuleerd, er wordt geen moedermelk afgekolfd)	11. Instelling voor afkolven aan beide kanten (“+” en “-” tegelijkertijd indrukken)
6. “+”-toets (stimulatie- of afkolfstand verhogen)	

6. Ingebruikname

 Aanwijzing

Controleer of de buitenkant van de verpakking van de borstkolf intact is en of alle onderdelen aanwezig zijn. Alvorens het apparaat te gebruiken, moet worden gecontroleerd of het apparaat en de toebehoren zichtbaar beschadigd zijn en moet al het verpakkingsmateriaal worden verwijderd. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met de verkoper of met de betreffende klantenservice.

6.1 Borstkolf in elkaar zetten

Nadat u de borstkolf uit de verpakking hebt gehaald, moet u eerst de plastic reservoirs controleren op scheuren, zodat de elektrische componenten niet onbeschermd aan vloeistoffen worden blootgesteld.

1. Draai het kolfopzetstuk op het flesje. Zorg ervoor dat het kolfopzetstuk goed vastzit, zodat er geen vloeistof kan weglekken.



2. Steek de siliconenslangen voor het afkolven aan beide kanten in de 2 kolfopzetstukken en in de borstkolven.



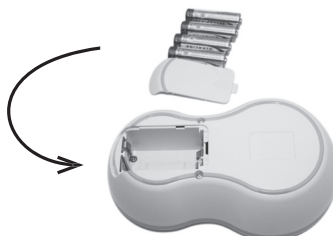
3. Steek de siliconenslang voor het afkolven aan een kant zonder verbindingstuk in het kolfopzetstuk en in de borstkolf.



4. Sluit het netsnoer aan op de borstkolf en steek de stekker in het stopcontact.



5. U kunt de borstkolf eventueel ook met batterijen gebruiken. Open hiervoor het deksel van het batterijvak aan de achterzijde van de motorunit. Plaats vier AA-batterijen (meegeleverd) in het apparaat. Let goed op dat de batterijen met de juiste polariteit worden geplaatst, zoals aangeduid. Let op de afbeelding in het batterijvak. Sluit het deksel van het batterijvak vervolgens weer tot het hoor- en merkbaar vastklikt. Vier nieuwe AA-batterijen zijn voldoende voor een gebruik van ca. 60 minuten (op de hoogste stand).



6.2 Borstkolf reinigen en steriliseren



WAARSCHUWING

Steriliseer en reinig de afzonderlijke componenten van de borstkolf (behalve de motorunit en de siliconenslang), die direct in aanraking komen met de moedermelk. Dit moet u zowel voor het eerste gebruik als voor elk volgende gebruik doen! Steriliseer de motorunit niet!

Voer de volgende stappen uit om de borstkolf correct te steriliseren:

1. Draai het kolfopzetstuk van het flesje.
2. Trek de siliconenslang uit het kolfopzetstuk en uit de motorunit.
3. Haal het siliconenmembraan en het siliconenventiel van het kolfopzetstuk.
4. Steriliseer de flesjes en de kolfopzetstukken (met siliconenmembraan en siliconenventiel) gedurende vijf minuten in kokend water of met een stoomsterilisator. Gebruik de borstkolf pas weer als alle afzonderlijke onderdelen droog zijn. Gebruik geen antibacteriële schoonmaakmiddelen, omdat deze het plastic van de borstkolf kunnen aantasten.
5. Reinig de motorunit voorzichtig met alleen een licht vochtige doek. Gebruik geen reinigings- of oplosmiddelen. Dompel de motorunit nooit onder water, omdat er anders vocht kan binnendringen, waardoor de borstkolf beschadigd raakt. Verwijder de batterijen uit de borstkolf als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

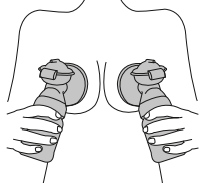
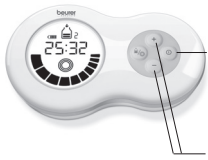
7. Bediening

7.1 Tips voor een betere melkstroom

- Kies voor het afkolven een locatie waar u zich zeer goed kunt ontspannen.
- Kies voor het afkolven een tijdstip waarop u zich zeer goed kunt ontspannen.
- De melkstroom wordt bevorderd als moeders hun kind dicht bij zich hebben of als ze een foto van hun kind bekijken.
- Als u uw kind aan een borst voedt, gebruikt u de borstkolf tegelijkertijd op de andere borst.
- Warmte en ontspanning bevorderen de melkstroom. Gebruik de borstkolf na het douchen of na het nemen van een bad.
- Als uw borsten opgezwollen of kapot zijn, legt u enkele minuten lang een warme doek op uw borsten. Dit bevordert de melkstroom.
- Probeer u te ontspannen als er niet meteen melk uit de borsten komt. Probeer het vervolgens enkele minuten later nog een keer.
- Als er bij het gebruik van de borstkolf na vijf minuten nog steeds geen melk uit de borsten komt, stopt u met het gebruik en probeert u het later nog een keer.
- Raadpleeg uw arts als het gebruik van de borstkolf veel pijn veroorzaakt.

7.2 Borstkolf bedienen

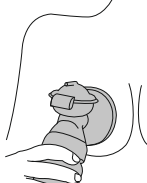
a) Voorbereiding voor het afkolven aan beide kanten:

1. Voordat u de borstkolf gebruikt, moet u eerst uw handen en uw borsten grondig wassen.	
2. Sluit de siliconenslang voor het afkolven aan beide kanten aan op de borstkolf en op de 2 flesjes.	
3. Ga met het bovenlichaam iets naar voren gebogen zitten. Om uw rug beter te ondersteunen, kunt u een kussen gebruiken.	
4. Plaats de borstkappen met siliconenkussens voorzichtig op de borsten. Zorg ervoor dat de tepels volledig omsloten zijn en dat er geen luchtballen aanwezig zijn. Voor een probleemloze werking moeten de borstkappen stevig op de borsten zijn vastgezogen.	
5. Druk op de -toets om de borstkolf in te schakelen. Als de borstkolf voor de eerste keer wordt ingeschakeld, is de software ingesteld op de dubbele afkolfmodus "2". Stel deze modus altijd in bij het afkolven aan beide kanten. De borstkolf start nu automatisch in de stimulatiemodus () en op het display wordt een countdown van 2 minuten weergegeven. Gedurende deze 2 minuten worden uw tepels gestimuleerd om deze op het afkolven van de moedermelk voor te bereiden. Stel met de  / -toetsen de gewenste intensiteit van de stimulatie in.	 1. Stimulatiemodus inschakelen 2. Intensiteit
6. Na afloop van de 2 minuten begint  op het display te knipperen. Druk op de -toets om nu met het afkolven van de moedermelk te beginnen. Stel de zuigkracht met de  / -toetsen zo in dat het gebruik van de borstkolf voor u aangenaam aanvoelt. Stop met het gebruik zodra de flesjes met 180 ml moedermelk zijn gevuld.	 3. Afkolven starten 4. Intensiteit

7. Druk op de -toets om terug te gaan naar de stimulatiemodus. De stimulatie en de aftelprocedure van 2 minuten starten opnieuw.  De borstkolf heeft een geheugenfunctie. Dat houdt in dat de laatst ingestelde stimulatie-/afkolfstand actief is als u de borstkolf inschakelt. Let op: ook de eenzijdige afkolfmodus “1” of dubbele afkolfmodus “2” wordt opgeslagen. Bij de dubbele afkolfmodus “2” moet het verbindingstuk voor het afkolven aan beide kanten op de motorunit worden aangesloten.	 5. Terug naar de stimulatiemodus
8. Druk op de -toets om de borstkolf uit te schakelen.	

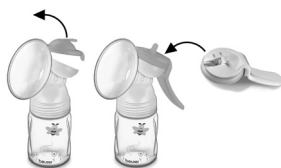
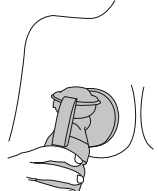
7.3 Borstkolf bedienen

b) Voorbereiding voor het afkolven aan een kant

1. Voordat u de borstkolf gebruikt, moet u eerst uw handen en uw borsten grondig wassen.	
2. De borstkolf moet op de siliconenslang voor het afkolven aan een kant en op 1 flesje worden aangesloten.	
3. Ga met het bovenlichaam iets naar voren gebogen zitten. Om uw rug beter te ondersteunen, kunt u een kussen gebruiken.	
4. Plaats de borstkap met siliconenkussen voorzichtig op de borst. Zorg ervoor dat de tepel volledig omsloten is en dat er geen luchtballen aanwezig zijn. Voor een probleemloze werking moet de borstkap stevig op de borst zijn vastgezogen.	

5. Druk op de  -toets om de borstkolf in te schakelen. Houd de toetsen “+” en “-” 2 seconden ingedrukt tot het apparaat naar de eenzijdige afkolfmodus “1” wordt omgeschakeld. De borstkolf start nu automatisch in de stimulatiemodus () en op het display wordt een countdown van 2 minuten weergegeven. Gedurende deze 2 minuten wordt uw tepel gestimuleerd om deze op het afkolven van de moedermelk voor te bereiden. Stel met de  /  -toetsen de gewenste intensiteit van de stimulatie in.	 1. Stimulatiemodus inschakelen 2. Intensiteit
6. Na afloop van de 2 minuten begint  op het display te knipperen. Druk op de  -toets om nu met het afkolven van de moedermelk te beginnen. Stel de zuigkracht met de  /  -toetsen zo in dat het gebruik van de borstkolf voor u aangenaam aanvoelt. Stop met het gebruik zodra het flesje met 180 ml moedermelk is gevuld.	 3. Afkolven starten 4. Intensiteit
7. Druk op de  -toets om terug te gaan naar de stimulatiemodus. De stimulatie en de aftelprocedure van 2 minuten starten opnieuw.  De borstkolf heeft een geheugenfunctie. Dat houdt in dat de laatst ingestelde stimulatie-/afkolfstand actief is als u de borstkolf inschakelt.	 5. Terug naar de stimulatiemodus
8. Druk op de  -toets om de borstkolf uit te schakelen.	

7.4 Bediening van de handkolf

1. Verwijder de kap met aansluitmogelijkheid van de borstkolf en breng de handgreep voor de handkolf inclusief siliconenmembraan aan. Druk hierbij het siliconenmembraan stevig op het pompopzetstuk tot het scharnier vastklikt.	
2. Plaats de borstkap met het siliconenkussen vervolgens voorzichtig op de borst. Zorg ervoor dat de tepel volledig omsloten is en dat er geen luchtballen aanwezig zijn. Voor een probleemloze werking moet de borstkap stevig op de borst zijn vastgezogen. Bedien de handkolf zoals afgebeeld.	
3. De sterkte van het afkolven kunt u kiezen tussen de zichtbare markeringen MIN/MAX.	 MAX MIN

7.5 Moedermelk bewaren

U kunt de afgekolfdde moedermelk een bepaalde tijd in de koelkast of in de diepvries bewaren.

- Als u de moedermelk wilt bewaren, moet u erop letten dat de borstkolf en de flesjes voor gebruik worden gedesinfecteerd. Bewaar de moedermelk uitsluitend in gedesinfecteerde reservoirs.
- Als u moedermelk wilt bewaren, moet u deze na het afkolven meteen in de koelkast of de diepvries zetten. Bewaar de moedermelk niet op kamertemperatuur.
- Als u moedermelk in de diepvries wilt bewaren, adviseren wij u de afkolfdatum op het flesje te zetten.



WAARSCHUWING

Neem de in de volgende tabel vermelde houdbaarheidstijden absoluut in acht:

	KAMERTEMPERATUUR	KOELKAST (ca. 3-5 °C)	DIEPVRIES (ca. -16 °C)
Vers afgekolfdde moedermelk	6 uur houdbaar	24 uur houdbaar (niet in de deur van de koelkast plaatsen, want daar is het niet koel genoeg)	3 maanden houdbaar
Ontdooide moedermelk (die eerder ingevroren was)	Meteen opmaken	10 uur	Niet opnieuw invriezen!

7.6 Moedermelk geven



Aanwijzing

Het meegeleverde flesje met de siliconenspeen kunt u gebruiken om de moedermelk te geven. Als alternatief kunt u de moedermelk ook met een NUK- of Avent-flesje afkolven en dan geven (een passende NUK-/Avent-adapter wordt meegeleverd).

- Voordat u de bewaarde moedermelk voor het voeden in een flesje giet, moet u ervoor zorgen dat het flesje gedesinfecteerd is.
- Om bevroren moedermelk te laten ontdooien, laat u de moedermelk 's nachts in de koelkast staan. Zo blijven de voedingsstoffen behouden. Zodra de moedermelk ontdooit is, moet deze binnen 24 uur aan de baby worden gegeven. Alleen in zeer dringende gevallen mag de moedermelk in warm water worden ontdooit.
- Gooi de moedermelk weg als deze onaangenaam ruikt.
- Verwarm moedermelk nooit in de magnetron. De moedermelk kan daardoor namelijk ongelijkmatig verwarmd worden, waardoor het kind zich bij het drinken aan de melk zou kunnen verbranden.
- Als u moedermelk opwarmt, moet u de temperatuur van de moedermelk controleren voordat de baby ervan drinkt.

8. Wat te doen bij problemen?

Probleem	Mogelijke oplossingen
De borstkolf zuigt niet.	• Controleer of alle onderdelen van de borstkolf correct in elkaar zijn gezet. • Controleer of het kolfopzetstuk correct op de borst is aangebracht.
Er wordt geen moedermelk afgekolfd.	• Controleer of de siliconenslang correct is aangesloten, of de ingestelde zuigkracht niet op de laagste stand staat en of de borstkolf is ingeschakeld. • Zorg ervoor dat er geen melkresten in het siliconenventiel aanwezig zijn die de melkstroom blokkeren.
Het afkolven van de moedermelk doet pijn.	• Probeer u te ontspannen en probeer het vervolgens nog een keer. Hoe meer u oefent, hoe beter het afkolven van de moedermelk zal lukken. • Verlaag de ingestelde zuigkracht met de “-”-toets. • Zorg ervoor dat er geen melkresten in het siliconenventiel aanwezig zijn die de melkstroom blokkeren. • Raadpleeg uw arts als de pijn erger wordt.
De moedermelk loopt onder het siliconenkussen uit.	• Verwijder het siliconenkussen en plaats het opnieuw. Zorg ervoor dat het siliconenkussen correct is geplaatst en dat het kolfopzetstuk goed vastzit. • Buig uw bovenlichaam iets naar voren.
Een onderdeel van de borstkolf is veranderd of beschadigd.	• Gebruik geen bijtende, gasvormige reinigings- of oplosmiddelen. • In sommige gevallen kunnen sterke temperatuurschommelingen het plastic van de borstkolf beschadigen. • Als een van de onderdelen beschadigd is, mag u de borstkolf niet meer gebruiken.
De borstkolf kan niet worden ingeschakeld	• Zorg ervoor dat de borstkolf correct in elkaar is gezet en ingeschakeld is. • Zorg ervoor dat de voedingsadapter correct op de borstkolf is aangesloten.

8.1 Reserveonderdelen en aan slijtage onderhevige onderdelen

Artikel	Artikelnummer
Pompopzetstuk inclusief siliconenkussen (normaal formaat), siliconenmembraan, siliconenventiel, siliconenslang en flesje inclusief schroefsluiting	953.15
Flesje met speen en flessendop	163.719
Adapter voor Avent- en NUK-flesjes	163.720
2 siliconenkussens (klein en normaal)	163.721
Handgreep voor handkolf inclusief siliconenkussen (normaal formaat)	163.722
Voet voor flesje	163.723

9. Verwijdering

Deponeer de gebruikte, volledig ontladen batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation of de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.

Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = batterij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium, Hg = batterij bevat kwik.



Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamel-punten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afval-verwijdering in uw gemeente.



10. Technische gegevens

Model	BY 70
Type	BY 40
Voeding	4 AA-batterijen van 1,5 V (alkalinebatterijen)
Spanning (ingang)	100-240V (AC~) 50/60 Hz
Spanning (uitgang)	6V (DC —) 1,0A
Afmetingen	168 x 100 x 53 mm
Gewicht	310 g (zonder batterijen)
Maximaal zuigvermogen	0,32 bar
Toegestane gebruiksomstandigheden	+5 °C tot +40 °C; 30% tot 85% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend); 700-1060 hPa omgevingsdruk
Toegestane omstandigheden voor bewa-ring	-20°C tot +60°C; 10% tot 95% relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend); 700-1060 hPa omgevingsdruk
Te verwachten looptijd	500 uur
Intervalgebruik	30 minuten ON / 30 minuten OFF
Veiligheidsklasse	Het apparaat is dubbel geïsoleerd en voldoet aan veiligheidsklasse 2 
Elektromagnetische verdraagzaamheid conform EN 60601-1-2	
Veiligheidseisen conform EN 60601-1	
Artikelen voor zuigelingen en peuters - Drinkgerei conform EN 14350	
Apparaat voor het afkolven van moedermelk	
Apparaat met fijn vacuüm en laag stroomvermogen	
Toegepast deel type BF	
Apparaat voor gebruik bij afwezigheid van explosieve of giftige gasmengsels of stikstofoxiden (lachgas) 	

Wijzigingen van de technische gegevens zonder kennisgeving zijn om actualiseringsredenen voorbe-houden.

Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN 60601-1-2 en is onderworpen aan bijzondere voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de elektromagnetische compatibiliteit. Let er daarbij op dat draagbare en mobiele HF-communicatie-installaties dit apparaat kunnen beïnvloeden. U kunt uitgebreide informatie aanvragen bij de klantenservice op het aangegeven adres of deze aan het eind van de gebruiksaanwijzing nalezen.

11. Netvoeding

Modelnr.	LXCP12-06
Ingang	100-240 V, 50-60 Hz 0,3 A max
Uitgang	6V DC, 1 A
Fabrikant	Shenzhen Longxc Power Supply Co., LTD
	Polariteit van de gelijkstroomaansluiting
	Dubbel geïsoleerd / veiligheidsklasse 2
Behuizing en beschermmantels	De behuizing van de netvoeding beveiligt tegen aanraking van onderdelen die onder spanning staan of kunnen staan (vingers, naalden, testhaak). De gebruiker mag de patiënt en de uitgangstekker van de AC/DC-netvoeding niet tegelijkertijd aanraken.